




BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

FILTRI

LATVIEŠU (LV)

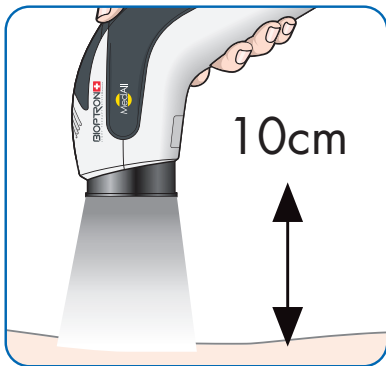

1



2



3



4

KĀ IZMANTOT?

No 10 cm attāluma novietojiet BIOPTRON ierīci ar vajadzīgo filtru tā, lai tas aptvertu apstrādājamo zonu (1. attēls). Apstrādājot laukumus, kas ir lielāki par krāsu filtra diametru, apstrādājiet tos pa vienam atbilstoši ieteicamajam laikam.

KĀ MAINĪT FILRU?

Uzmanīgi un bez spēka izņemiet nomaināmo filtru (2. attēls) un ievietojiet vajadzīgo krāsu filtru, kā norādīts 3. attēlā. Turiet filtra ārējo gredzenu, nevis objektīvu.

KĀ TĪRĪT FILTRU? (4. attēls)

1. Noņemiet filtru no ierīces, turot aiz filtra ārējā gredzena.
2. Izmantojiet mīkstu, mitru, neplūksnu drānu, lai nesaskrāpētu stikla virsmu.
3. Nosusiniet filtru ar citu drānu bez plūksnām.

GARANTĪJA:

- 5 gadi, ja tiek lietots kā paredzēts un ja tiek ievēroti brīdinājumi
- Šī garantija attiecas uz materiālu un ražošanas defektiem
- Šī garantija neattiecas uz estētiskām izmaiņām, kas radušās parasta nolietojuma rezultātā un kas neietekmē izstrādājuma veiktspēju, vai bojājumiem, kas radušies izstrādājuma nepareizas lietošanas dēļ.

BRĪDINĀJUMI

1. Neizmantojiet nekādas ķīmiskas vielas (piem., izopropilspirtu), lai notīrītu stikla virsmas un filtra gredzena iekšējo vai ārējo pusi.
2. Glabājiet filtru aizsargmaciņā, lai izvairītos no putekļu uzkrāšanās un krāsas maiņas saules gaismas iedarbības dēļ.
3. Filtrs ir izgatavots no trausla stikla, tāpēc ar to jārikojas uzmanīgi!
4. Lietotājam nav atļauts noņemt filtra lēcu.



PMD-ME145-22-LV
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

LATVIEŠU (LV)